

## Ekran Mesajları

H1	Cihaz, kan şekeri seviyesinin 600 mg/dL (33.3 mmol/L) seviyesinden daha <b>yüksek</b> olduğunu tespit etmiştir.
LO	Cihaz, kan şekeri seviyesinin 20 mg/dL (1.1 mmol/L) seviyesinden daha <b>düşük</b> olduğunu tespit etmiştir.
H1	Testi gerçekleştirmek için sıcaklık çok yüksek.
LO	Testi gerçekleştirmek için sıcaklık çok düşük.
Er1	Test Stribi düzgün takılmamıştır, hatalı strip uygulaması.
Er6	
Er3	Cihazda sorun olduğuna dair hata mesajı. "reset" tuşuna basınız ve cihazı yeni bir strip ile tekrar deneyiniz. Problem devam ediyorsa lütfen merkez teknik servisimizi arayınız.
Er5	
L-0	Pil gücü zayıf. Cihaz 50 ölçüm daha yapabilir.
Er0	Pil gücü düşük. Yeni pil takınız.

## Kullanım için Önlemler:

plusMED fasTTest görüntüleme sisteminin yanlış kullanımından ve bu operasyon kılavuzunda beyan edilen kullanıma uyulmamasından kaynaklanacak yaralanmalarda sorumluluk kabul etmemekteyiz.

**plusMED fasTTest Test striplerini sadece plusMED fasTTest cihazı ile kullanınız.**

plusMED fasTTest sistemi ile alınmış ölçüm sonuçlarınıza göre tedavi şeklinizi kendi kendinize değiştirmemelisiniz. Mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

**plusmed**

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

**fasTtest**

**Hızlı  
Kullanım  
Rehberi**

CE 1783



Cihazı açmak için öncelikle pili takın. Cihazın arkasından bulunan reset düğmesi-ne basın ve aşağıdaki talimatları uygulayın.

## Test Özeti



### Adım 1

Test Stribinin test bölgesini cihaza takınız. Stribin beyaz kısmı yukarıda olmalıdır. Ekranda hareket eden noktalı çizgiler görülür ve bip sesi duyulur. Ardından "●" sembolü yanıp söner. Şimdi kan örneği almak için hazırsınız.



### Adım 2

Kan örneğini stribin temas bölgesine değdiriniz. Onay penceresinin tamamen dolmasını bekleyiniz. Dolunca bip sesi gelir.



### Adım 3

5 saniye sonra, test sonucunuz ekranda görünür ve hafızaya kaydedilir.

## Hafıza Özelliği



### Adım 1

Cihazı açmak için M tuşuna basınız. Öncelikle ekranda tarih ve zaman belirir. Her S tuşuna bastığınızda kontrol solüsyonununun 7gün, 14 gün,30 günlük ortalama değerleri ekranda belirecektir.



### Adım 2

Her S tuşuna bastığınızda, cihaz son 300 ölçümü geri çağıracaktır. Hafıza dolduğunda en eski değer silinerek yenisi kayıt edilecektir.



### Adım 3

Hafıza modundan çıkmak için M tuşuna basılı tutarak cihazı kapatabilirsiniz.





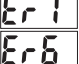
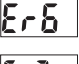
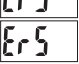
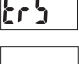
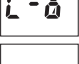

### TEST ÖNCESİ:

Detaylı bilgi için plusMED fasTTest kullanım kılavuzunu okuyunuz.

### Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok. Topçu İş Merkezi No:1/12,  
34418, 4.Levent, İSTANBUL, TÜRKİYE Tel +90 212 319 50 00 Fax +90 212 319 50 50

## Display Messages

	Meter detects blood glucose level <b>higher</b> than 600 mg/dL (33.3 mmol/L).
	Meter detects blood glucose level <b>lower</b> than 20 mg/dL (1.1 mmol/L).
	Ambient temperature was too high to perform the test.
	Ambient temperature was too low to perform the test.
	Test strip is not inserted properly, defective test strip period.
	
	Meter malfunction. Press "reset" button and check the meter again with the test strip. If the problem persists, contact technical service for help.
	
	Battery power is low. Meter will provide approximately 50 more measurements.
	Battery power is low. Replace immediately.

## Precautions for Use:

We are not responsible for any injury resulting from incorrect use of the plusMED fasTTest Monitoring System and not in line with the instructions set forth in this operating manual.

**Only use plusMED fasTTest Test Strip with the plusMED fasTTest Meter.**

Any change or administer of medication based on the plusMED fasTTest blood glucose test results without the consent and advice of a physician or healthcare professional is not recommended.

**plusmed**

BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

**fasTTest**

**Quick  
Reference  
Guide**

CE 1783



To turn the Meter on, first insert the battery, then press the reset button located at the back of the Meter and proceed with the following instructions.

## Test Summary



### Step 1

Insert the Test Strip, white side face up, contact bar's end first, into the test port. A beep will sound and moving dotted lines will appear followed by a flashing "●" symbol. Now you are ready to obtain a blood sample.



### Step 2

Place blood sample onto the test well of the Test Strip. Wait until Confirmation Window has completely filled with blood and meter will beep.



### Step 3

After 5 seconds, your blood glucose result will appear on the display and will be stored into the Meter memory automatically.

## Memory Feature



### Step 1

Press the M button to turn on the Meter. The date and time will appear first. Each time you press the S button, the result of control solution, 7-day, 14-day, 30 days average will be shown.



### Step 2

Each time you press the S button, the Meter will recall the last 300 test results accordingly. When the memory is full, the oldest result is removed and replaced with the newest result.



### Step 3

To exit the memory mode, press and hold the M button to turn off the Meter.

### BEFORE TESTING:

Read detailed instructions in your plusMED fasTTest User's Manual

### Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok. Topçu İş Merkezi No:1/12,  
34418, 4.Levent, İSTANBUL, TÜRKİYE Tel +90 212 319 50 00 Fax +90 212 319 50 50